




Qufora® IrriSedo MiniGo Tube


Instructions for use

The tube for Qufora IrriSedo MiniGo is a flexible tube that is an accessory item for when you need a better reach during irrigation.

Tube

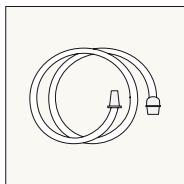

Assembled with Qufora IrriSedo MiniGo

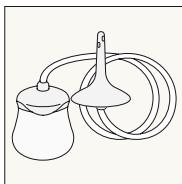

The tube is single-use

The tube is used to connect the cone and the soft pump.

When assembling the Qufora IrriSedo MiniGo with tube, first, connect the tube to the soft pump. Then, connect the other end of the tube to the cone.

During use, please follow the instructions as described in Qufora IrriSedo MiniGo Instructions for Use, which is in the Qufora IrriSedo MiniGo box and online at www.qufora.com.


After use, separate the parts by separating the tube and the soft pump. Place the tube and cone in the pouch (they are both single use only). The pouch can be folded and sealed using the sticky area, then disposed of in normal household waste.

Note: Please use Qufora IrriSedo MiniGo with the tube as advised by your healthcare professional.


Brugsanvisning

Forlængerslangen til Qufora IrriSedo MiniGo er en fleksible slange som er ment som tilbehør. Slangen giver en større fleksibilitet under irrigationen, feks til folk med dårlig balance.

Forlængerslange

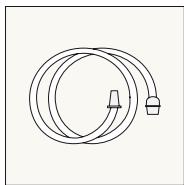

Forlængerslange tilsluttet MiniGo pumpen

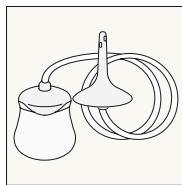

Forlængerslangen er
kun til engangsbrug

Forlængenslangen tilsluttes konus og den bløde pumpe.

Når du tilslutter Qufora IrriSedo MiniGo med forlængerslangen, anbefales det at forlængerslangen først tilsluttes den bløde pumpen og dernæst konus.

Ved brug anbefales det at læse og følge den brugsanvisning, som følger med Qufora IrriSedo MiniGo produktet eller som findes på www.qufora.com.


Efter brug skilles forlængerslangen fra pumpen. Konus og forlængerslangen er begge til engangsbrug og kan placeres i posen efter brug. Posen kan foldes sammen og forsegles vha. klæbefeltet, og bortskaffes som husholdningsaffald.

Bemærk: Brug altid kun forlængerslangen som anvist af det sundshedsfaglige personale.


Bruksanvisning

Slangen till Qufora IrriSedo MiniGo är en flexibel slang som är ett tillbehör när du behöver en bättre räckvidd under spolning.

Slang

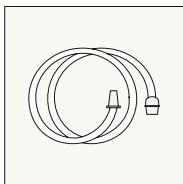

Monterad med Qufora IrriSedo MiniGo

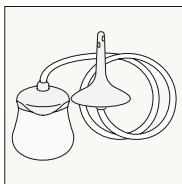

Röret är avsett för engångsbruk

Slangen används för att ansluta konen och den mjuka pumpen.

Vid montering av Qufora IrriSedo MiniGo med slang, anslut först slangen till den mjuka pumpen. Anslut sedan den andra änden av slangen till konen.

Följ instruktionerna som beskrivs i bruksanvisningen för Qufora IrriSedo MiniGo, som finns i Qufora IrriSedo MiniGo-kartongen och online på www.qufora.com.


Separera delarna efter användning genom att separera slangen och den mjuka pumpen. Placera slangen och konen i påsen (de är båda för engångsbruk). Påsen kan vikas ihop och förseglas med hjälp av det självhäftande området och sedan kasseras i hushållsavfallet.

Anmärkning: Använd Qufora IrriSedo MiniGo enligt de rekommendationer du fått av din sjukvårdspersonal.


käyttöohjeet

Qufora IrriSedo MiniGo letku on joustava letku, joka on lisävaruste, kun tarvitset paremman ulottuvuuden kastelun aikana.

Putki

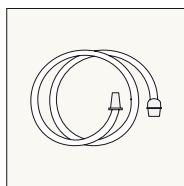

koottu Qufora IrriSedo MiniGo kanssa

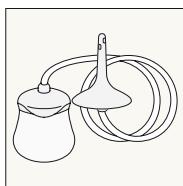

Putki on kertakäytöinen.

The tube is used to connect the cone and the soft pump.

Kun kokoat Qufora IrriSedo MiniGo -järjestelmän letkun kanssa, liitä ensin letku pehmeään pumppuun. Liitä sitten letkun toinen pää kartioon.

Noudata käytön aikana ohjeita, jotka on annettu Qufora IrriSedo MiniGo -käyttöoppaassa, joka löytyy Qufora IrriSedo MiniGo -pakkauksesta ja verkossa osoitteesta www.qufora.com

Irrota osat käytön jälkeen irrottamalla letku ja pehmeä pumppu. Aseta letku ja kartio pussiin (molemmat ovat kertakäyttöisiä). Pussi voidaan taittaa ja sulkea liimapinnalla ja hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Huomautus: Käytä Qufora IrriSedo MiniGoa terveydenhuollon ammattilaisen ohjeiden mukaan.

15604-Q3_250225



www.qufora.com

Qufora A/S
Gydevang 28-30
3450 Allerød
Denmark

Tel: +45 88 300 592
info@qufora.com
www.qufora.com

 **Qufora**[®]

Qufora[®] is a registered trademark of Qufora A/S. © 02/2025. All rights reserved Qufora A/S, 3450 Allerød, Denmark.